

Älydosetti ohje




Älydosetti hälyttää kun on lääkkeiden oton aika

Punaisestä napista voi soittaa hoitajalle


Myös hoitaja voi soittaa älydosettiin. Painamalla punaista nappia puheluun voi vastata

Muista pitää laite kytkettynä pistorasiaan

ÄLYDOSETIN RAKENNE

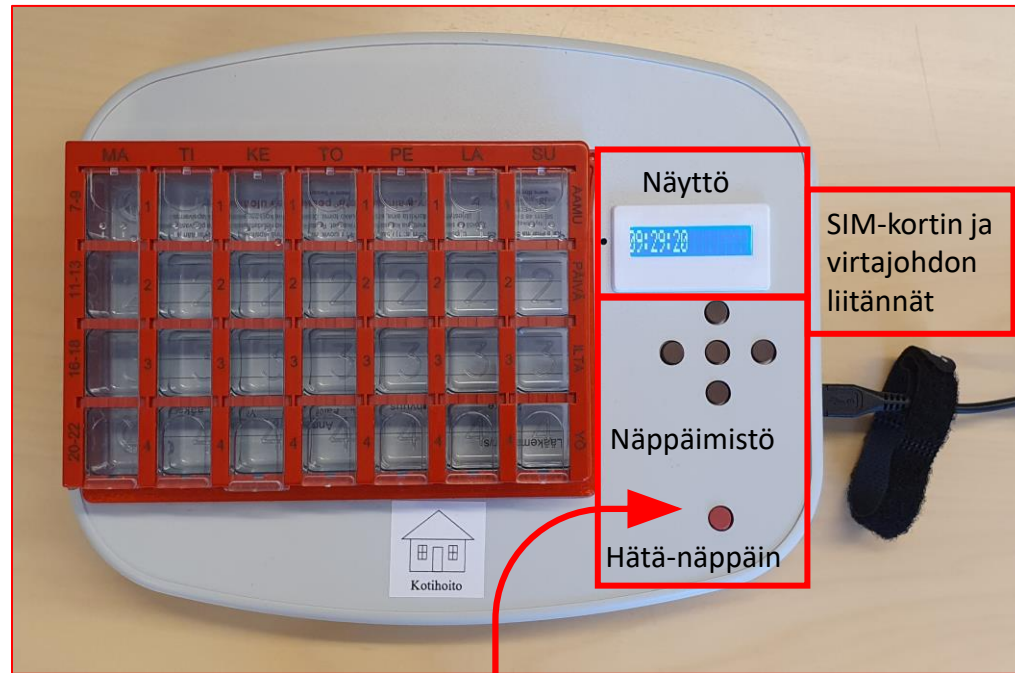

Hätä-näppäimellä voi soittaa ja vastata puheluihin.

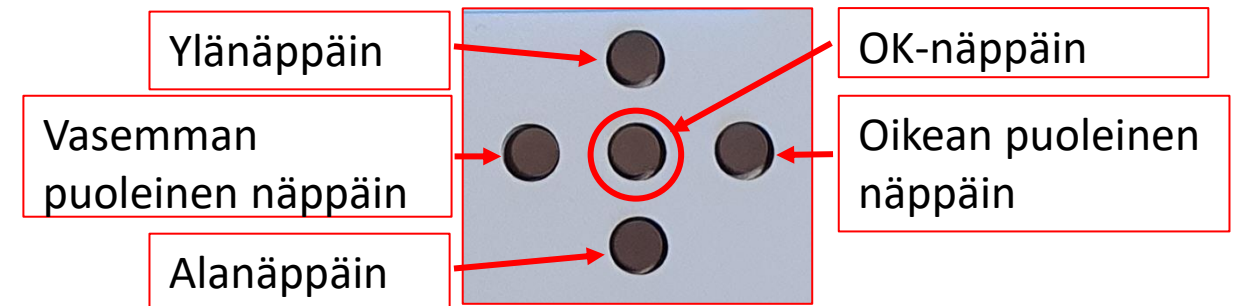


ÄLYDOSETIN KÄYTTÖÖNOTTO

- SIM-kortti pitää olla tyypiltään mini
 - SIM-kortti tulee olla tyhjä viesteistä
 - Voit poistaa mahdolliset viestit vain puhelimella
 - PIN-koodin kysely tulee olla pois päältä
 - Voit poistaa pin-koodin kyselyn vain puhelimella
1. SIM-kortin metallinen puoli tulee olla ylöspäin ja viistokulman tulee mennä ensin sisään
 2. Paina SIM-korttia pohjaan kunnes kuulet naksahduksen
 3. SIM-Kortin saa ulos painamalla sitä ensin sisäänpäin ja vetämällä se ulos



ÄLYDOSETIN KÄYTTÖÖNOTTO

1. Aseta puhelinnumerosi älydosettiin soittamalla älydosetin puhelinnumeroon. Videovalikosta löydät videon tästä vaiheesta.
2. Älydosetti katkaisee soiton automaattisesti ja numero tallentuu hallintapuhelimeksi.
3. Älydosetti lähettää tekstiviestin rekisteröinnistä.

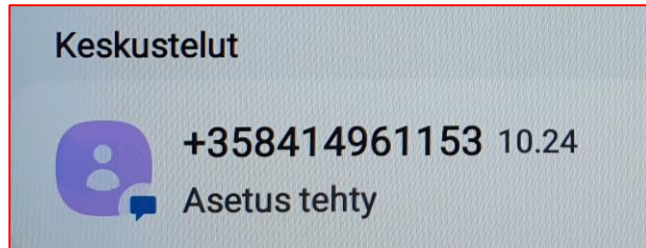

ÄLYDOSETIN KÄYNNISTYS

1. Kytke virtalähde älydosettiin
2. Kytkeytyminen kestää noin 2 minuuttia
3. Laite on valmis, kun näytössä näkyy antennin kuva ja viiva, joka ilmaisee signaalin tasoa



*Älydosetin
alkunäyttö.*



*Älydosetti tunnistaa
SIM-kortin.*




ÄLYDOSETIN SAMMUTUS


1. Irrota virtajohto laitteesta



2. Paina hetken aikaa vasemman puoleista näppäintä

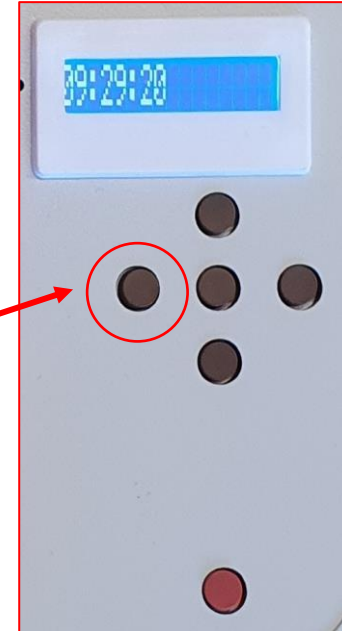

3. Näyttö ilmoittaa laitteen sammumisen

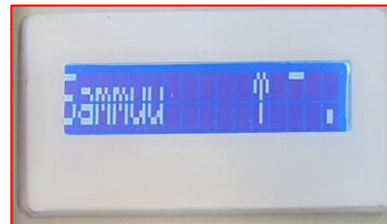


ÄLYDOSETIN ANTAMAT ÄÄNIKOMENNOT: Videokirjastosta löydät videot näistä äänikomennoista

- *"on lääkkeiden ottoaika veden kanssa"*, on lääkkeenottoaika
 - Hälytys loppuu, kun dosetin nostaa pois laitteen päältä
 - Jos dosettia ei nosteta pois, laite lähettää tekstiviestin asetettuun puhelinnumeroon
- *"palauta annosjakelu laatikko alustaan"* Dosetti on ollut pois laitteesta yli minuutin ajan
 - Hälytys loppuu, kun dosetin palauttaa paikoilleen
- *"älä ota lääkkeitä vielä"* Dosetti nostetaan laitteesta, vaikka ei ole lääkkeenottoaika
 - Hälytys loppuu, kun dosetti palautetaan paikoilleen

LÄÄKKEENOTTOAJAN ASETTAMINEN:

1. Paina hetken aikaa OK-näppäintä, että näyttö herää ja pääset kohtaan ”Lääkkeiden aika 1” ja paina OK.

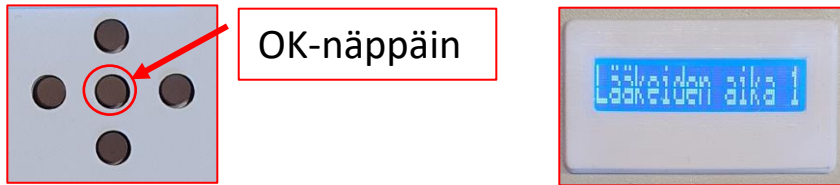



2. Aseta lääkkeenottoaika.

Aseta ensin tunnit oikein käyttämällä ylä- ja alanäppäintä, paina oikeanpuoleista nappia ja aseta minuutit oikein.





LÄÄKKEENOTTOAJAN ASETTAMINEN:

4. Kun aika on asetettu oikein, paina OK.

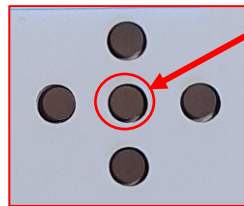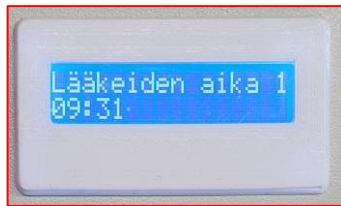

OK-näppäin

5. Valitse tämän jälkeen, otetaanko lääkkeitä joka päivä vai joka toinen päivä. Käytä valintaan ylä- ja alanäppäimiä. Lopuksi paina OK.

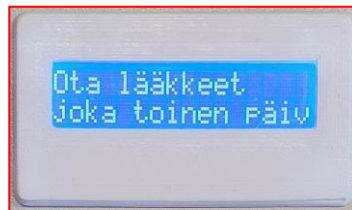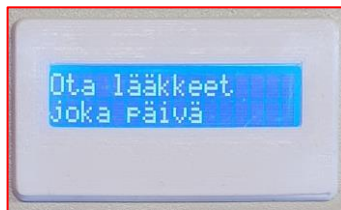


6. Jos haluat asettaa useamman lääkkeenottoajan, voit valita valikosta seuraavia vaihtoehtoja "Lääkkeiden aika 2"- "Lääkkeiden aika 6"
- Voit asettaa kuusi (6) eri lääkkeenottoaikaa

HÄLYTYSAIKA

1. Paina hetken aikaa OK-näppäintä, että näyttö herää.
2. Siirry kohtaan ”Hälytysaika” käyttämällä ylä- ja alanäppäimiä. Paina OK.



3. Lääkkeenottoajan hälytyksen pituuden voi muuttaa 1-60 minuutin välillä. Käytä ylä- ja alanäppäintä.

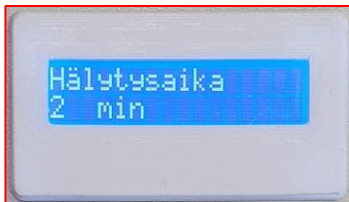

4. Lopuksi paina OK.


ÄÄNENVOIMAKKUUDEN SÄÄTÄMINEN:

Piippauksen äänenvoimakkuutta voi säätää valikossa *"Summeri On/Off"*

1. Paina hetken aikaa OK-näppäintä ja siirry oikeaan kohtaan käyttäen ylä- ja alanäppäintä.
2. Kun olet kohdassa *"Summeri On/Off"*, paina OK.



3. Säädä äänen voimakkuutta ylä- ja alanäppäimillä. Lopuksi paina OK.

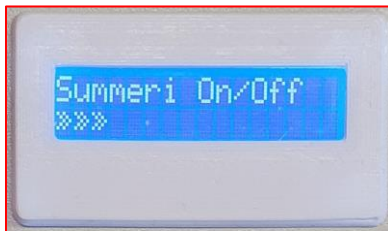


ÄÄNENVOIMAKKUUDEN SÄÄTÄMINEN:

Puheen äänenvoimakkuuden säätäminen tapahtuu valikossa *"Voimakkuus"*

1. Paina hetken aikaa OK-näppäintä ja siirry oikeaan kohtaan käyttäen ylä- ja alanäppäintä.
2. Kun olet kohdassa *"Voimakkuus"*, paina OK.



3. Säädä äänen voimakkuutta ylä- ja alanäppäimillä. Lopuksi paina OK.

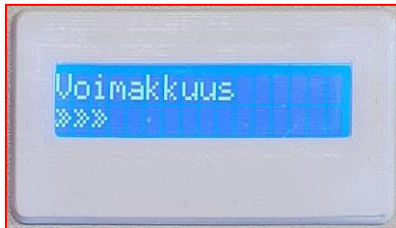



PUHEÄÄNEN VALINTA, MIEHEN TAI NAISEN ÄÄNI

Voit valita puheääneksi joko miehen äänen tai naisen äänen

1. Paina OK-näppäintä ja siirry valikkoon ”Puhe Ääni” käyttämällä ylä- ja alanäppäintä, paina OK.



2. Valitse miehen tai naisen ääni käyttämällä ylä- ja alanäppäintä. Lopuksi paina OK.

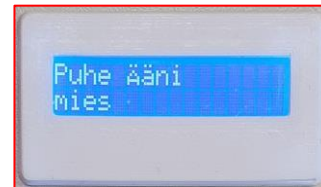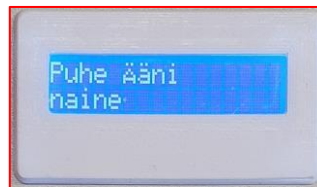



KIELEN VALINTA, SUOMI, RUOTSI JA ENGLANTI

Kielen valinta vaikuttaa sekä näytön kieleen että äänen kieleen

1. Paina OK ja siirry kohtaan "Aseta kieli" käyttäen ylä- ja alanäppäintä, paina OK.



2. Valitse oikea kieli (suomi, sverige, english) painamalla ylä- ja alanäppäintä, lopuksi paina OK.

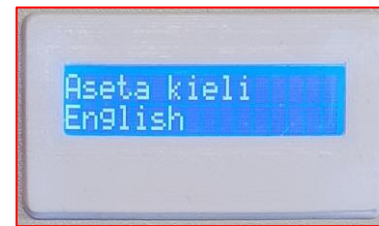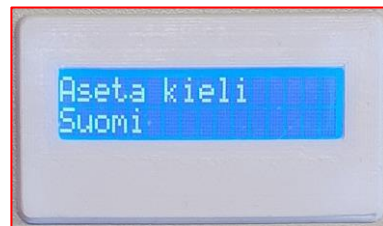


KELLON AJAN ASETTAMINEN

1. Paina OK ja siirry kohtaan "Aseta kello" käyttäen ylä- ja alanäppäintä. Paina OK.



2. Muuta kellonaika. Ensin muuta tunnit käyttäen ylä- ja alanäppäintä, sen jälkeen siirry minuutit-kohtaan käyttäen oikeaa näppäintä. Valitse oikeat minuutit käyttäen ylä- ja alanäppäintä.

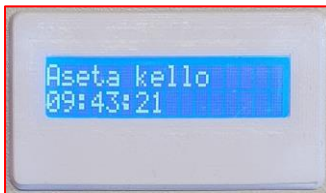

3. Lopuksi paina OK.

KALENTERI

1. Paina OK ja siirry kohtaan ”Kalenteri” käyttäen ylä- ja alanäppäintä. Paina OK.



2. Valitse oikea päivämäärä. Valitse ensin päivä käyttämällä ylä- ja alanäppäintä.



3. Siirry kuukausi-kohtaan käyttämällä oikean puoleista näppäintä. Käytä kuukauden valintaan ylä- ja alanäppäintä.
4. Siirry vuosi-kohtaan käyttämällä oikean puoleista näppäintä. Käytä vuosiluvun valintaan ylä- ja alanäppäintä.
5. Paina lopuksi OK.


JOS HALUAT OTTAA DOSETIN MUKAAN:

1. Paina OK ja siirry kohtaan ”Muistutus mukaan” käyttäen ylä- ja alanäppäintä. Paina OK.




2. Valitse ylä- ja alanäppäintä käyttäen, haluatko lääkkeenottomuistutuksen:


Tekstiviestillä

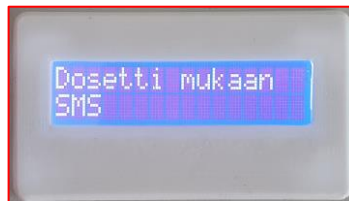

Puhelulla

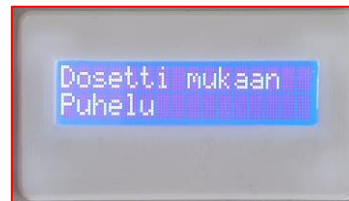

Ei muistutusta

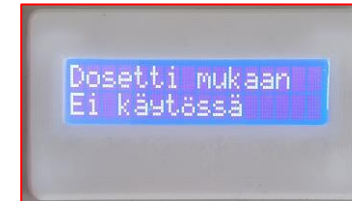

3. Lopuksi paina OK.

PUHELINSOITTOON VASTAAMINEN

1. Paina OK ja siirry kohtaan "Auto vastaus" käyttäen ylä- ja alanäppäintä. Paina OK.



2. Valitse ylä- ja alanäppäintä käyttäen

Valitse "Kyllä", niin Älydosetti vastaa puolestasi 20 sekunnin kuluttua



Valitse "Ei", niin puheluun vastaaminen tapahtuu painamalla laitteen punaista Hätänäppäintä




3. Lopuksi paina OK.

PUHELIN LISTAN PYYHKIMINEN

1. Paina OK ja siirry kohtaan ”Pyyhi puh.lista” käyttäen ylä- ja alanäppäintä. Paina OK.



2. Voit poistaa halutun puhelinnumeron listalta 1-10. Valitse poistettava puhelinnumero käyttämällä ylä- ja alanäppäintä.

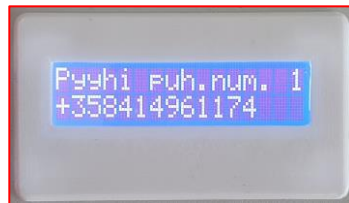

3. Poista numero käyttämällä oikean puoleista näppäintä.
4. Paina OK.

PUHELUN SOITTOÄÄNEN SÄÄTÖ

1. Paina OK ja siirry kohtaan ”Soittoääni” käyttäen ylä- ja alanäppäintä. Paina OK.



2. Valitse ylä- ja alanäppäintä käyttäen, millaisen soittoäänen haluat kuulla puhelun tullessa. Valitse vaihtoehto hälytysäänistä 1-19.



3. Paina OK, kun olet valinnut mieluisan äänen.
4. Valitse, millä voimakkuudella haluat puhelun hälytysäänen olevan, käytä ylä- ja alanäppäintä sopivan äänenvoimakkuuden valintaan asteikolla 1-100.



5. Valitse OK.

ÄLYDOSETIN MUUT OMINAISUUDET

- Älydosettiin voidaan liittää myös turvaranneke, ovikytkin, ikkunakytkin, palovaroitin ja vesivuotovahti.
- Näiden valikot ovat:



- Tässä ohjeessa ei ohjeisteta käyttämään yllä lueteltuja lisälaitteita, lisätietoa saatavilla valmistajan sivuilla. <https://dosecontrol.fi/>

Älydosetti tekstiviesti ohjaus ohje

- SIM-Kortti pitää olla tyypiltään mini
- SIM-Kortti tulee olla tyhjä viesteistä
- PIN-Koodin kysely tulee olla pois päältä



Asennus

SIM-Korttin metallinen puoli tulee olla ylöspäin ja viisto kulman tulee mennä ensin sisään

Paina SIM-Korttia pohjaan kunnes kuulet naksahduksen.

SIM-Kortin saa ulos painamalla sitä ensin sisäänpäin ja vetämällä se ulos

Asetukset voi tehdä vain hallintapuhelimen numerosta

Ensimmäinen soittaja rekisteröityy pääkäyttäjäksi ja laite ilmoittaa siitä tekstiviestillä

Numerot joita lisätään tulee olla +358 muodossa

Puhelin numeroiden tallentaminen ja muokkaaminen:

!10= numero !	Käyttäjä 1 eli hallintanumero
!11= numero !	Käyttäjä 2
!12= numero !	Käyttäjä 3
!13= numero !	Käyttäjä 4
!14= numero !	Käyttäjä 5

Huomio että **numero** pitää olla **+358** muodossa, esim:

!10=**+35850123123!**

Numeron poisto:

numeron tilalla laitetaan vain +358 poistaaksesi numeron, esim:

!10=**+358!**

Komennot:

Hälytys tekstiviestien asetukset

!20=teksti! hälytysteksti jos lääkkeitä ei ole otettu

!21=teksti! hälytysteksti hälytysnapista tai RF painikkeesta

Lisälaitteet:


!22=teksti! hälytysteksti palovaroitin hälytys tai vesivuotaovahti

!23=teksti! hälytysteksti ruokaa ei ole syöty määräajassa

teksti osioon voi kirjoittaa oman vapaavalintaisen tekstin joka on viestissä hälytyksen sattuessa

Lääkkeen ottoajat:

!51=kello,pvm!

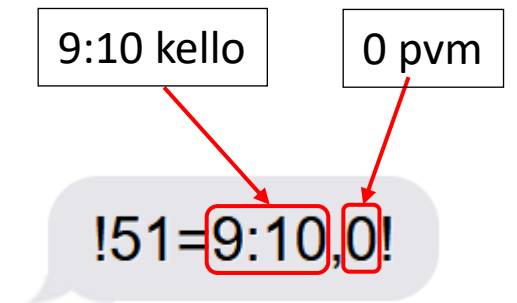

kello= Kellonaika jolloin halutaan ottaa lääkkeet

pvm= Lääkkeiden otto joko joka päivä **0** tai joka toinen päivä **1**

!51=9:10,0! Valmis malli näyttää tältä

Lääkkeen ottoaikoja voi olla 6kpl:

!51=kello,pvm!

!52=kello,pvm!

!53=kello,pvm!

!54=kello,pvm!

!55=kello,pvm!

!56=kello,pvm!

Poistaaksesi hälytys lähetä haluttuun ottoaikaan kellonaika muodossa **--:--**

Esim, haluataan poistaa ottoaika 6:

!56=--:--!

Vastaanottajien valinta

Numerot merkitsevät käyttäjä numeroa, esim:

!40=1,2,3,4,5! Nyt kaikki käyttäjät saavat ilmoituksia

!40=1,5! Tai halutaan hälytykset vain käyttäjille 1 ja 5

Kyselyt, laite vastaa tekstiviestillä

!31! Ilmoittaa tallennetut puhelinnumerot

!32! Ilmoittaa mihin numeroihin lähetetään tekstiviesti

!37! Asettaa kellonajan oikeaksi

!38! Luettelo lääkkeiden ottoajoista

!30! Kertoo signaalin vahvuudesta

!36! Kertoo akun varauksen

!39! Kertoo 3 viimeistä oven avaus aikaa

Laitteen lukitus ja vapautus

!68=lock! Laite on lukittu

!69=open! Laite on auki

Älydosetti voi muistuttaa käyttäjää myös lääkkeen otosta tekstiviestillä tai soitolla

!15=numero! Käyttäjän puhelin numeron lisäys,

esim: **!10=+35850123123!**

Numeron poisto **!15=+358!**

!17! Hälytyksen poisto käytöstä

!18! Muistutus tekstiviestillä

!19! Muistutus soittamalla