

Dose Control

Självständigt, säkrare, längre

manuell



The Smart Dose INSTRUKTIONER



Smart Dose apparat varnar dig när det är dags att ta din medicin.

Du kan ringa sjuksköterskan med den röda knappen.

Sjuksköterskan kan även ringa Smarta Dosen (apparat).

Du kan svara på samtalet genom att trycka på den röda knappen.

Kom ihåg att hålla enheten inkopplad.

STUKTUR HOS MEDICINDISPENSE RANORDNINGEN



Visa

SIM-kort och
nätsladdanslutningar

Tangentbord

Larmknapp

Larmknappen kan användas för
att ringa och svara på samtal.



Nätsladdanslutning

SIM-kortanslutning

Ok-nyckel

Upp-knappen

Vänster nyckel

Höger nyckel

Ned-knappen

SMART DOSET- DRIFTSÄTTNINGSSINSTRUKTIONER

- Typen av SIM-kort måste vara mini.
 - SIM-kortet får inte ha meddelanden, det vill säga det måste vara tomt.
 - Du kan bara radera meddelanden via telefon.
-
- PIN-kodsfrågan måste vara avstängd.
 - Du kan bara ta bort PIN-kodsfrågan via telefon.
 1. Metallsidan på SIM-kortet ska vara vänd uppåt och avfasningen måste gå in först.
 2. Sätt in SIM-kortet genom hålet i bilden tills du hör ett klick.
 3. SIM-kortet kan tas bort genom att först trycka in det och sedan dra ut det.



SMART DOSET- DRIFTSÄTTNINGSSINSTRUKTIONER

1. Ring enhetens telefonnummer så att du kan ställa in ditt nummer på enheten.
2. Enheten lägger på automatiskt och numret lagras som ett kontrollnummer.
3. Enheten skickar ett SMS om registrering.

Samtal

+358 414 9611 53 11:26
Inställing klar

SMART DOSE - ENHETSSTART

1. Anslut strömkällan till enheten.
2. Det tar cirka två minuter att ansluta.
3. Enheten är klar när skärmen visar bilden av antennen och en linje som indikerar signalnivån.




Smart Dose till enhetens
starskärm



Enheten känner igen SIM-kortet

AVSTÄNGNING AV ENHETEN

1. Koppla ur nätsladden från enheten.
2. Tryck kort på den vänstra knappen.
3. Displayen visar att enheten är avstängd.

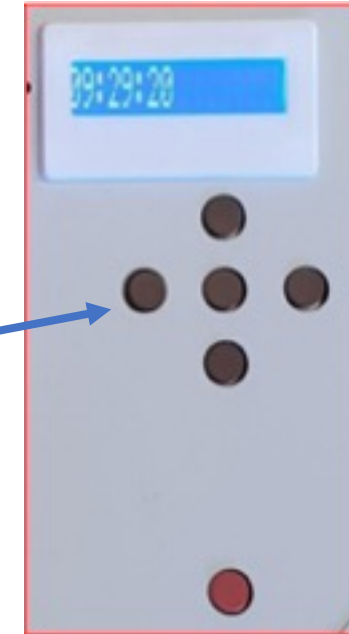

STÄNG AV

RÖSTKOMMAN DO SOM GES AV SMART DOSE ENHETEN:

"Det är dags att ta medicine med vatten",

Det är den tidpunkt då medicine ska tas.

Larmet avbryts när doslådan tas bort från enheten.

Om doslådan inte tas bort skickar enheten ett textmeddelande till det inställda telefonnumret.

"Sätt tillbaka dosboxen i facket".

Doslådan har varit ur enheten i mer än en minut.


Larmet avbryts när du sätter tillbaka dosboxen på sin plats.

"Ta inte medicin ännu" – meddelande när doslådan lyfts från enheten, trots att det inte är dags att ta medicin.

Larmet avbryts när doslådan sätts tillbaka på sin plats.

BESTÄM TID ATT TA MEDICINEN:

1. Tryck kort på OK-tangenten så att skärmen vaknar och du kommer till "medicineringstid 1" och tryck OK.

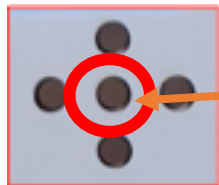


OK nyckel

MEDICINERINGTID

2. Ställ in medicineringstiden.

Ställ först in timmarna korrekt: använd upp- och nedknapparna, tryck på högerknapp och ställ in minuterna korrekt.

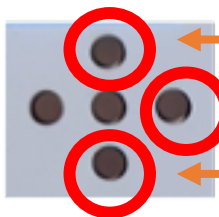

Upp-knappen

Höger nyckel


Ned-knappen

MEDICINERINGTID 1
09:31

BESTÄM TID ATT TA MEDICINEN:

3. När tiden är korrekt inställd trycker du på OK.

MEDICINERTID 1
09:31

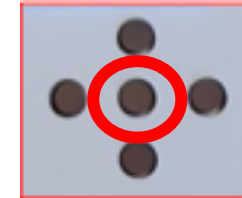

4. Välj därefter om du ska ta medicine varje dag eller varannan dag. Använd upp- och nerknapparna för att välja. Tryck till sist på OK.

TA MEDICINEN
VARJE DAG

TA MEDICINEN
VARANNAN DAG

5. Om du vill ställa in mer än en medicineringstid kan du välja följande alternativ från menyn: "Medicineringstid 2" – "Medicineringstid 6"

Du kan ställa in sex (6) olika medicinintagstider.

LARMTID

1. Tryck kort på OK-knappen för att väcka skärmen.
2. Gå till "alarmtid" med upp- och nerknapparna.
3. Tryck på OK.

4. Längden på medicintidslarmet kan ändras mellan 1 och 60 minuter. Använd upp- och nerknapparna.

5. Tryck till sist OK.

LARMTID

LARMTID
2 MINUTTER

VOLYMKONTROLL:

Volymen på pipsignalen kan justeras i menyn "BEEP On/Off"

1. Tryck kort på OK-knappen och flytta till rätt position med upp- och nerknapparna.
2. När du är i "volym", tryck på OK.

3. Använd upp- och nerknapparna för att justera volymen. Tryck till sist på OK.

VOLYM PÅ/AV

VOLYM PÅ/AV



VOLYMKONTROLL:

Justering av talvolymen görs i menyn "Volym".

1. Tryck på OK-tangenten ett ögonblick och flytta till rätt plats med upp- och nerknapparna.
2. När du är i "Volym", tryck på OK.
3. Använd upp- och nerknapparna för att justera volymen. Tryck till sist på OK.



VOLYM



VOLYM



VAL AV TALENS RÖST, MAN ELLER KVINNLIK RÖST

Du kan välja antingen en mansröst eller en kvinnas röst som röst

1. Tryck på OK-tangenten och gå till menyn "Talljud" med upp- och nedknapparna, tryck på OK.
2. Välj en manlig eller kvinnlig röst med upp- och nerknapparna. Tryck till sist på OK.

TAL RÖST

TALANDE RÖST
KVINNA

TALANDE RÖST MAN

SPRÅKVAL, FINLAND, SVERIGE OCH ENGELSKA

Valet av språk påverkar både språket på displayen och språket för aviseringsljudet.

1. Tryck på OK och flytta till "Ställ in språk" med upp- och nedknapparna, tryck på OK.
2. Välj rätt språk (finska, svenska, engelska) genom att trycka på upp- och nedknapparna, tryck slutligen på OK.

STÄLL IN SPRÅKET

STÄLL IN SPRÅKET
TILL FINLAND

STÄLL IN SPRÅKET
TILL SVERIGE

STÄLL IN SPRÅKET
TILL ENGELSKA

STÄLL IN KLOCKA TID

1. Tryck på OK och flytta till "Ställ klocka" med upp- och nerknapparna. Tryck på OK.
2. Ändra tiden. Ändra timvyn; använd upp- och nedknapparna och flytta sedan till minuter med högerknapp. Använd upp- och nerknapparna för att välja rätt minuter.
3. Tryck till sist på OK.

STÄLL KLOCKAN

STÄLL KLOCKAN
09:43:21

KALENDAR

1. Tryck på OK och flytta till "Kalender" med upp- och nedknapparna. Tryck på OK.
2. Välj rätt datum. Välj först en dag med upp- och nedknapparna.
3. Gå till månaden med höger knapp. Använd upp- och nedknapparna för att välja en månad.
4. Gå till år med höger tangent. Använd upp- och nedknapparna för att välja år.
5. Tryck till sist på OK.



**OM DU VILL TA MED EN DIG DOSE CONTROL
ENHETEN:**

1. Tryck på OK och flytta till "Påminnelse genom" med upp- och nerknapparna. Tryck på OK.
2. Använd upp- och nedknapparna för att välja om du vill ha en medicinpåminnelse:

MED SMS

TA MED DIG
ENHETEN SMS

I TELEFON

TA MED DIG
ENHETEN I TELEFON

INGEN PÅMINNELSE

TA MED DIG
ENHETEN INGEN
PÅMINNELSE

3. Tryck till sist på OK.

SVARAR SAMTALET

1. Tryck på OK och flytta till "Autosvar" med upp- och nedknapparna. Tryck på OK.
2. Välj ett alternativ med upp- och nedknapparna
3. Välj "Ja" så svarar Dose Control enheten åt dig efter 20 sekunder

AUTOMATISKT SVAR
JA

Välj "Nej", så besvaras samtalet genom att trycka på enhetens röda nödknapp

AUTOMATISKT SVAR
NEJ

3. Tryck till sist på OK.

JUSTERING AV RINGVOLYM

1. Tryck på OK och flytta till "Städa telefonlista" med upp- och nedknapparna. Tryck på OK.
2. Du kan ta bort önskat telefonnummer från listan 1-10. Välj telefonnumret som ska raderas med upp- och nedknapparna.
3. Radera ett nummer med högerknapp.
4. Tryck på OK.

STÄDA TELEFONLISTA

STÄDA TELEFONLISTA
+358414961174

JUSTERING AV SAMTALSRINGVOLYM

1. Tryck på OK och flytta till "Ringtone" med upp- och nerknapparna. Tryck på OK.
2. Använd upp- och nerknapparna för att välja vilken ringsignal du vill höra när du får ett samtal. Välj ett alternativ från larmljud 1-19.
3. Tryck på OK när du har valt det ljud du gillar.
4. Välj den volym som du vill att samtalssignalen ska ha, använd upp- och nerknapparna för att välja lämplig volym på en skala från 1-100.
5. Tryck på OK.

RINGSIGNALL

RINGSIGNALL 1

RINGSIGNALL 19

RINGSIGNALNIVÅ

ANDRA FUNKTIONER PÅ ENHETEN

Ett säkerhetsarmband, dörrbrytare, fönsterbrytare, brandlarm och vattenläckageövervakning kan också kopplas till Dose Control -enheten.

- Menyerna för dessa är:

FÖLJ UTANFOR

ETT
SÄKERHETSSARMBAN
D

TOALETTAN
VÄNDNING

ANSLUTA FF433

STÄLL IN STARTTID

Dessa instruktioner instruerar dig inte att använda de extra enheterna som anges ovan, ytterligare information finns tillgänglig på tillverkarens webbplats.
<https://dosecontrol.fi>

Kontrollinstruktion för enhetens textmeddelande



- SIM – kortet måste vara I ministorlek
- SIM-kortet måste vara tomt på meddelanden
- PIN-kodsfrågan måste vara avstängd

Installation Metallsidan på SIM-kortet ska vara vänd uppåt och det sneda hörnet ska gå in först.

Tryck ner SIM-kortet tills du hör ett klick.

SIM-kortet kan tas ut genom att först trycka det inåt och dra ut det

Inställningar kan endast göras från hanteringstelefonnumret.

Den första uppringaren registrerar sig som huvudanvändare och enheten meddelar det med ett textmeddelande.

Siffrorna som ska läggas till måste vara i +358-format.

Spara och redigera telefonnummer:

10= nummer!	Användare 1, eller hanteringstelefonnumret
11=nummer!	Användare2
12=nummer!	Användare3
13=nummer!	Användare4
14=nummer!	Användare5

Observera att numret måste vara i +358-format, t.ex.: **!10=+35850123123!**

Ta bort ett nummer:

lägg bara +358 istället för numret för att radera numret, t.ex.:

Kommandon:

Inställningar för larmtextmeddelanden

!20=text! Larmtext om medicinen inte har tagits

!21=text! Larmtext från larmknappen eller RF-knappen.

Tillbehör:

!22=text! larmtext brandlarm larm eller vattenläckagevakt

!23=larmtext mat har inte ätits inom tidsgränsen

I textdelen kan du skriva en egen fritt vald text som kommer att finnas i meddelandet vid larm.

Läkemedelsintagstider:

!51=hour,date!

!51=9:10,0!

klocka= Tid på dygnet då du vill ta medicinen

0 dagar 9:10 klockan

date= Tar medicin antingen varje dag 0 eller varannan dag 1

!51=9:10.0! Den färdiga modellen ser ut så här
Läkemedlet kan tas 6 gånger::

151=klocka,date!

152=klocka,date!

153=klocka,date!

154=klocka,date!

155=klocka,date!

156=klocka,date!

För att ta bort larmet;

skicka till önskad

medicinintagstid,

klocktidsformat --:--

Till exempel, du vill ta bort

ta tid 6:

156=....!

Urval av mottagare

Siffrorna anger användarnumret, till exempel:
!40=1,2,3,4,5! Nu kommer alla användare att få aviseringar

!40=1.5! Eller vill du bara ha aviseringar om larm för användare 1 och 5

Frågor, enheten svarar med ett textmeddelande!

!31! Visar sparade telefonnummer

!32! Indikerar vilka nummer som ska skickas till
Textmeddelande

!37! Ställer in tiden till rätt tid

!38! Lista över medicinintagstider

!30! Berättar om signalstyrkan

!36! talar om mängden laddning i batteriet

!39! Visar de senaste 3 dörröppningstiderna

Låsning och upplåsning av enheten

!68=låst! Enheten är låst

!69=open! Enheten är öppen.

Enheten kan också påminna användaren om att ta läkemedlet via sms eller samtal

!15=nummer! Lägga till användarens telefonnummer,

e.g.: !10=+35850123123!

Ta bort ett nummer !15=+358!

!17! Inaktiverar larmet

!18! Påminnelse via sms

!19! Påminnelse genom att ringa